

inLab MC X5 + aspiratore

INCLUSO
SOFTWARE
inLab CAM 22.0




inLab MC X5: l'unità di produzione a 5 assi.



5 Anni**
di garanzia

L'unità di produzione a 5 assi inLab MC X5 è stata appositamente concepita per soddisfare le esigenze del laboratorio di ottimizzazione e produzione a costi vantaggiosi. MC X5 offre al laboratorio maggiore indipendenza in termini di materiali, di indicazioni e di elaborazione di dati CAD esterni.

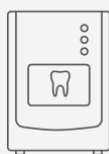

MOLAGGIO/ FRESATURA

Produzione a secco/umido


Unità di produzione per ceramiche, polimeri, metalli, dischi e blocchetti. Con inLab MC X5 è possibile lavorare in un'unica macchina dischi standard (Ø 98,5 mm con uno spessore fino a 30 mm) e blocchetti. Il passaggio dai dischi ai blocchetti avviene in pochi secondi. L'innovativo supporto multi-blocchetto accoglie fino a sei blocchetti di diverso materiale, garantendo così la massima produttività anche in caso di più lavori su singoli denti.



ALLOGGIAMENTO DISCHI SICURO

Nesting perfetto

La ghiera di supporto dischi consente il riposizionamento esatto di dischi già usati, in modo da poter continuare la lavorazione precedentemente interrotta. Ciò significa che una protesi già fresata può essere comodamente rimossa e in seguito nuovamente montata nel supporto grazie ad un processo di lavorazione perfettamente calibrato.

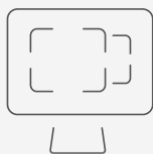

SCELTA FLESSIBILE DEI MATERIALI

Open concept

Possibilità di scegliere in ogni momento tra i materiali proposti nella libreria disponibile o in combinazione con le soluzioni di altri produttori. MC X5 dà inoltre modo di realizzare abutment in titanio monocomponente personalizzati a partire dai grezzi per abutment prefabbricati.