



Eccellenza in
ceramica integrale

Flussi di lavoro
supportati da impianti

Lavoro di team
digitale

Sommario

Informazioni
tecniche



Cercon[®] Multistrato:

Eccellenza della ceramica integrale in zirconia, fornita grazie a un lavoro di team digitale senza interruzioni e a una zirconia più intelligente






Zirconia: un materiale leader nei restauri interamente in ceramica


Restaurare il sorriso di un paziente è un compito complesso. Se richiedono una corona o ponte interamente in ceramica, i risultati devono essere riproducibili, affidabili e robusti. Con **25 anni di esperienza in tutto il mondo**, la nostra soluzione Cercon in zirconia è stata sapientemente progettata per offrire una qualità comprovata per sicurezza e successo a lungo termine.

Noi di Dentsply Sirona abbiamo sviluppato un'eccellente **soluzione multistrato in zirconia** che consente fiducia e soddisfazione del paziente. nella protesi definitiva.


Vantaggi della nostra soluzione multistrato Cercon in zirconia:

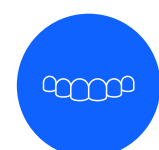

L'estetica elevata incontra la resistenza

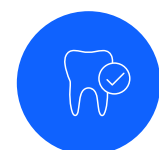

Eccellente accuratezza del colore

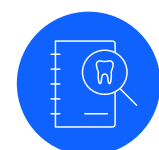

Risparmio di tempo ed efficienza



Sicurezza clinica comprovata¹



1. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale clinico Cercon](#)





[< Torna ai vantaggi](#)

Cercon Multilayer: estetica incontra resistenza

La soluzione multistrato in zirconia che offre **estetica, la flessibilità e supporta la sicurezza** anche per i ponti widespan.



Eccellente accuratezza del colore

Eccellente corrispondenza cromatica per tutte le 16 tonalità VITA® con tecnologia True Color.




Gradiente realistico

Quattro strati di tonalità da creare un gradiente senza soluzione di continuità dall'incisione alla dentina, proprio come un dente naturale con tecnologia Seamless Transition Layer.



Risparmio di tempo ed efficienza

Facile da posizionare e gli stessi programmi di sinterizzazione (inclusa sinterizzazione rapida in 90 minuti per ponti fino a 4 unità) per tutti i dischi Cercon Zirconia. Basta lucidare ed è fatto.

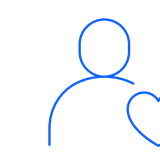

25 anni di esperienza con zirconia

Pionieri nella pre-colorazione e zirconia pre-sinterizzata.

Tre dischi Cercon ML

una soluzione multistrato di zirconia.

Cercon yo ML

Massimo livello di estetica e resistenza. Ponti ibridi multistrato ottimizzati per l'ittrio fino a 14 unità. Per ogni tipo dei restauri in zirconia in laboratorio.



Cercon ht ML

Zirconia ibrida multistrato ad alta trasparenza per un'ampia gamma di applicazioni, fino a ponti a 14 unità.

Cercon xt ML

Multistrato extra trasparente Zirconia per ponti a 3 unità fino al secondo premolare.

Cercon yo ML

Cercon ht ML

Cercon xt ML

Applicazioni



Tutti i dischi Cercon sono disponibili con diametro da 98 mm.



< Torna ai vantaggi

Cercon Multilayer: estetica incontra resistenza

La soluzione multistrato in zirconia che offre **estetica, la flessibilità e supporta la sicurezza** anche per i ponti widespan.



Eccellente accuratezza del colore

Eccellente corrispondenza cromatica per tutte le 16 tonalità VITA® con tecnologia True Color.




Gradiente realistico

Quattro strati di tonalità da creare un gradiente senza soluzione di continuità dall'incisione alla dentina, proprio come un dente naturale con tecnologia Seamless Transition Layer.



Risparmio di tempo ed efficienza

Facile da posizionare e gli stessi programmi di sinterizzazione (inclusa sinterizzazione rapida in 90 minuti per ponti fino a 4 unità) per tutti i dischi Cercon Zirconia. Basta lucidare ed è fatto.

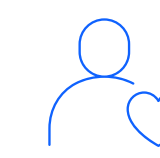

25 anni di esperienza con zirconia

Pionieri nella pre-colorazione e zirconia pre-sinterizzata.

Tre dischi Cercon ML – una soluzione multistrato in zirconia

Cercon yo ML

Zirconia ibrida multistrato ottimizzata per l'ittria 4Y (dentina) e 5Y (incisale) per l'equilibrio ottimale tra resistenza e trasparenza per ogni prodotto tipo di protesi in zirconia.

- Elevata resistenza alla flessione 1000 MPa (dentina) 900 MPa (incisale)
- Trasparenza 45% (dentina) 49% (incisale)
- Utilizza la tecnologia True Color con formulazioni di miscelazione proprietarie per **una corrispondenza precisa delle tonalità.**
- **Equilibrio ottimale tra resistenza e trasparenza per ogni caso di zirconio**
Da una singola corona a ponti a 14 unità. Nessuna restrizione di nesting nemmeno per i ponti widespan.



Cercon ht ML

Cercon xt ML

Applicazioni



Un benchmark in zirconia precisione del colore

L'accuratezza del colore è un fattore chiave di successo per i restauri in ceramica integrale. La nostra tecnologia True Color offre sicurezza nella riproduzione del il colore desiderato del dente e riduce al minimo il rischio di complicanze.

- **Sviluppato grazie a decenni di esperienza** nel campo della ceramica riproduzione delle tonalità
- **Eccellente corrispondenza cromatica** per tutte le 16 tonalità VITA®
- **Formula singole** per ogni tonalità della dentina e dell'incisale
- **Qualità costante per ogni lotto** supportato da il nostro processo di produzione e il controllo in corso



Altamente valutato

in termini di precisione del colore per
tutte le 16 classiche tonalità VITA®.¹



< Torna ai vantaggi

“Per me, i multistrato Cercon di Dentsply Sirona sono il nuovo benchmark in base al quale misurare tutti gli altri multistrato. Sono certo che questo materiale lo apprezzerà quanto lo sono io. Provalo e ottieni il fresaggio”.

Devaughn Fraser, Highland Dental Laboratory, Canada²

1. Dati interni in archivio. Per ulteriori informazioni, contatta Consumables-Data-Requests@dentsplysirona.com.
2. I medici e i tecnici potrebbero aver ricevuto un compenso per la condivisione della loro esperienza.



[< Torna ai vantaggi](#)

Struttura del disco creata per combinarsi estetica e sicurezza

Con Cercon, puoi affidarti a **25 anni di esperienza nella zirconia**.

Cercon yo ML

Elevata resistenza alla flessione ed estetica realistica per un'ampia indicazione

Materiale ibrido in zirconia multistrato per l'equilibrio ottimale tra resistenza e trasparenza. Gradiente da 1000 MPa nell'area della dentina (4Y-TZP) fino a 900 MPa nell'area incisale (5Y-TZP).
Trasparenza 45-49%.




Posizionamento della protesi con software CAM in un disco Cercon yo ML da 18 mm.

Cercon ht ML

Elevata resistenza alla flessione ed estetica realistica per un'ampia indicazione

Materiale ibrido in zirconia multistrato per combinare un'elevata resistenza alla flessione e un'estetica naturale dei denti in un unico disco. Gradiente da 1200 MPa nell'area della dentina (3Y-TZP) fino a 750 MPa nell'area incisale (5Y-TZP). Trasparenza 41-49%.

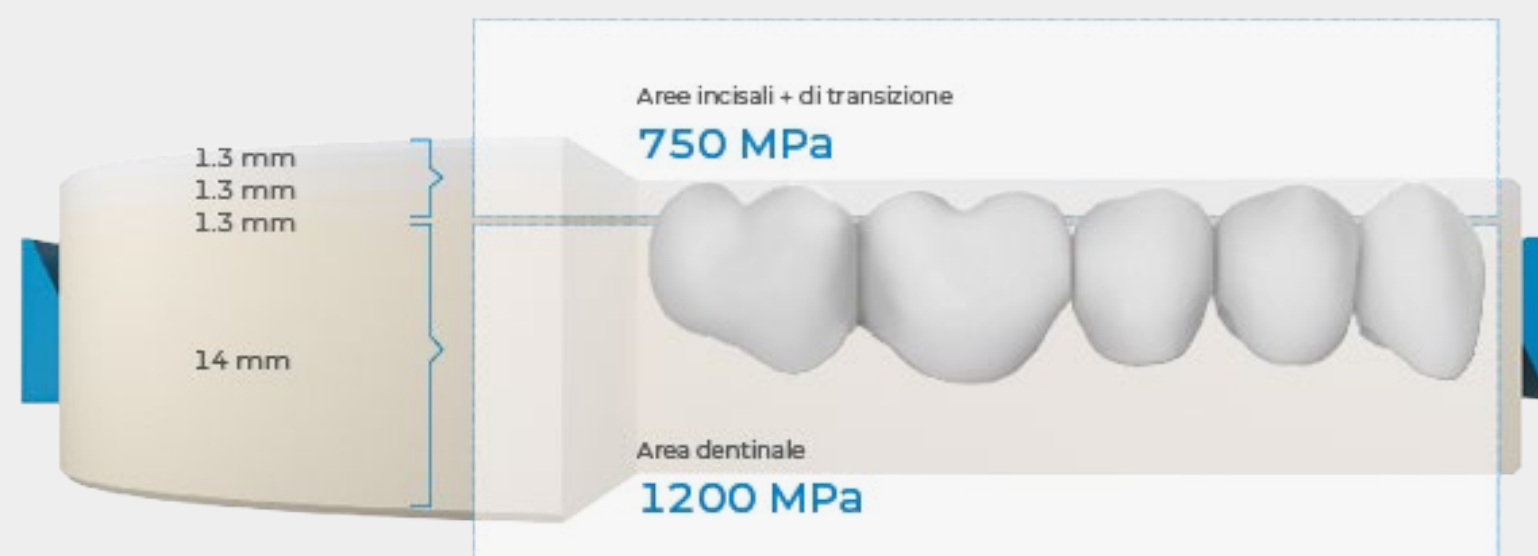


Posizionamento della protesi nel software CAM in un disco Cercon ht ML da 18 mm.

Si consiglia di posizionare la corona o il ponte nella parte superiore del disco per ottenere il risultato estetico ottimale.

Cercon xt ML

Estetica elevata per restauri monolitici

Abbinamento dell'estetica naturale dei denti senza la necessità di faccette o macchie, specialmente per la regione anteriore (resistenza alla flessione 750 MPa). Trasparenza 49%.

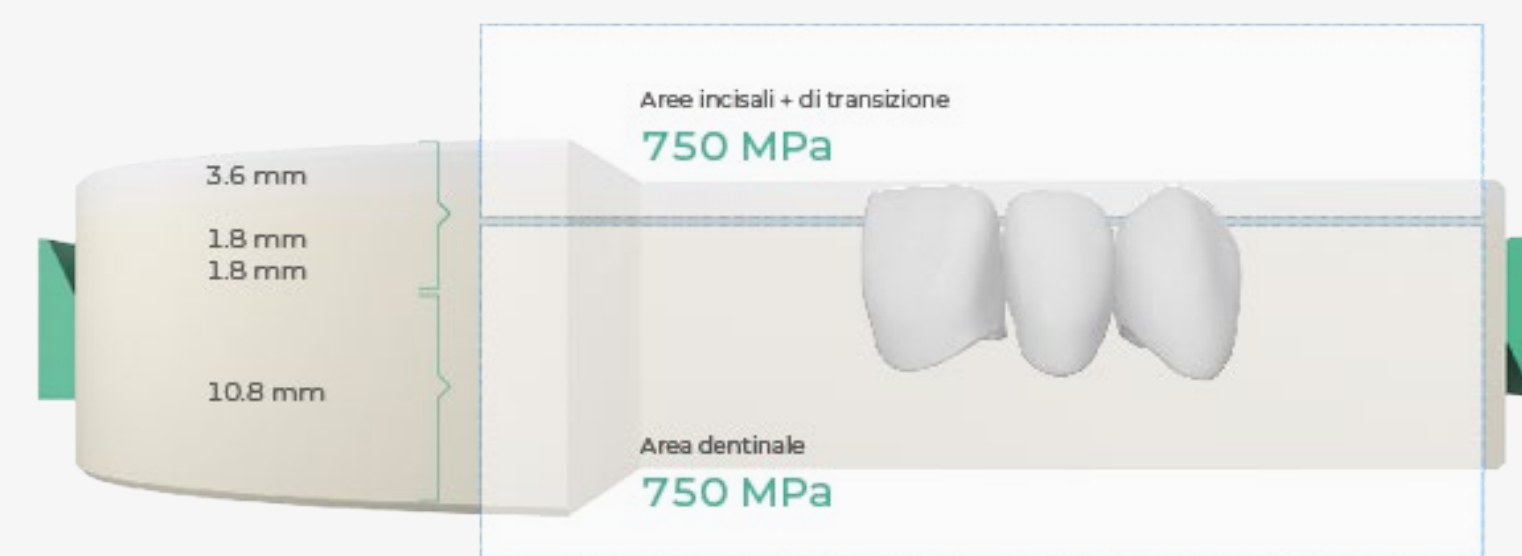

Posizionamento del restauro nel software CAM in un Cercon da 18 mm disco xt ML.