



FINITURA E LUCIDATURA ZIRCONIA SINTERIZZATA

JOTA ZIRKONPROFI KIT

Il kit 1358 contiene strumenti per la lavorazione di restauri in ossido di zirconio. Le pietre diamantate consentono una rimozione grossolana, le pietre Zirkonflex costituiscono la base per una finitura fine e i lucidatori diamantati girevoli lucidano alla perfezione i restauri in ossido di zirconio sinterizzato.

jota



Kit 1358

In offerta € 71,14 +iva

Finitura e lucidatura
zirconia sinterizzata

Kit 1358

Strumenti inclusi:



Prezzo offerta ordinando i ricambi del kit nella loro confezione originale

9840.HP.140 (confezione da pz. 2) € **32,45** + iva **ZIR9972M.HP.100** (confezione da pz. 2) € **6,36** + iva

C31RL.HPL.010 (confezione da pz. 1) € **44,93** + iva **515L.HP.012** (confezione da pz.2) € **27,46** + iva

863.HP.012 (confezione da pz. 5) € **34,37** + iva **882.HP.018** (confezione da pz. 5) € **34,37** + iva



SINTERIZZATA LAVORAZIONE E LUCIDATURA DELLA ZIRCONIA

Con il sistema di preparazione e lucidatura **JOTA ZIR GLOSS**, offriamo un sistema perfettamente coordinato che copre tutte le fasi dei restauri in ossido di zirconio, dalla separazione del restauro dal grezzo fino alla lucidatura a specchio. La fresa in metallo duro super sottile con gambo allungato è perfetta per separare il restauro senza il rischio di danni causati da rotture o inceppamenti. I gommini diamantati per la lucidatura in due fasi completano la finitura della collaudata pietra JOTA Zirconflex, utilizzata per la finitura a secco della zirconia.



KIT 1434

IN OFFERTA € 175,97 + iva

Lavorazione e lucidatura
della zirconia

Kit 1434

Strumenti inclusi:



Prezzo offerta ordinando i ricambi del kit nella loro confezione originale

C31RL.HPL.010 (confezione da pz.1) € **44,93** + iva **SZ652R.HP.035** (confezione da pz. 2) € **18,72** + iva

SZ715.HP.160 (confezione da pz.1) € **9,36** + iva **ZIR9868M.HP.140** (confezione da pz. 2) € **24,34** + iva

ZIR9868F.HP.140 (confezione da pz. 2) € **24,34** + iva **ZIR9865MeF.HP.260** (conf. pz. 2) € **46,80** + iva



FINITURA E LUCIDATURA SINTERIZZATA

ZIRCONIA POLISHING KIT

Il KIT 1446 ZIRCONIA POLISHING contiene tutti gli strumenti necessari per la finitura e la lucidatura di manufatti protesici in ossido di zirconio. La pietra JOTA Zirkonflex è eccellente per la levigatura e la finitura di tutte le superfici in zirconia. Con il sistema di lucidatura diamantata a due fasi ZIR GLOSS, tutte le superfici possono essere lucidate a specchio. Gli strumenti orientabili si adattano in modo flessibile alle geometrie dei solchi. Il raffreddamento ad acqua, la pasta lucidante e la glasatura non sono necessari.



Kit 1446

In offerta € 151,63 +iva

Finitura e lucidatura
zirconia
Kit 1446

Strumenti inclusi:



Prezzo offerta ordinando i ricambi del kit nella loro confezione originale

SZ652R.HP.035(confezione da pz. 2) € 18,72 + iva **SZ667.HP.035** (confezione da pz. 2) € 18,72 + iva

SZ732.HP.050 (confezione da pz. 2) € 18,72 + iva **ZIR9868M.HP.140** (confezione da pz.2) € 24,34 + iva

ZIR9868F.HP.140 (confezione da pz.2) € 24,34 + iva **ZIR9865MeF.HP.260** (conf. da 1 pz) € 46,80 + iva



PRE-SINTERIZZATO GREEN STATE REFINING

Difetti come crepe e microschegge che si verificano durante il processo di produzione o durante la caratterizzazione del biossido di zirconio e del Sintron non possono essere eliminati con la successiva sinterizzazione. Si consiglia pertanto la lucidatura in fase verde o bianca. Il KIT DI RAFFINAZIONE GREEN STATE 1936 contiene strumenti per il taglio dal blocco o dal grezzo, la rettifica dei punti di contatto, la texturizzazione delle superfici e lucidanti PRE-SINTERPOL per la lucidatura verde o bianca.

Jota




Kit 1936

In offerta € 71,14 +iva

Lavorazione e lucidatura
zirconia pre-sinterizzazione

Kit 1936

Strumenti inclusi:

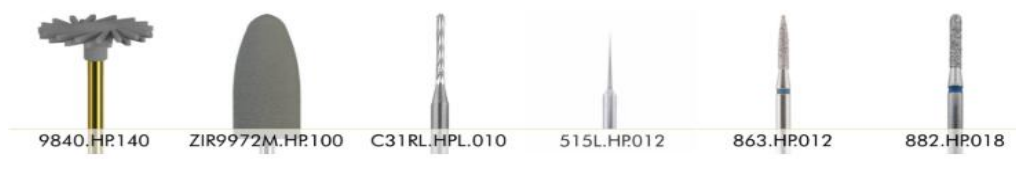

Prezzo offerta ordinando il singolo ricambio

9840.HP.140 (confezione da pz. 2) € **32,45** + iva **ZIR9972M.HP.100** (confezione da pz. 2) € **6,36** + iva

C31RL.HPL.010 (confezione da pz. 1) € **44,93** + iva **515L.HP.012** (confezione da pz.2) € **27,46** + iva

863.HP.012 (confezione da pz. 5) € **34,37** + iva **882.HP.018** (confezione da pz. 5) € **34,37** + iva



SINTERIZZATA Finitura della zirconia

JOTA ZIRCONFLEX KIT

Il kit JOTA Zirconflex offre la soluzione ottimale per la lavorazione di tutte le superfici in zirconia sinterizzata. Non è richiesto alcun raffreddamento ad acqua, l'accumulo di calore rimane minimo e si possono evitare in tutta sicurezza transizioni di fase dannose nell'ossido di zirconio. Allo stesso tempo, le proprietà del manufatto lavorato vengono preservate e il rischio di microfratture è ridotto al minimo.

jota



KIT 1322

IN OFFERTA € 52,42 + Iva

Finitura della zirconia

Kit 1322

Strumenti inclusi:



Prezzo offerta ordinando i ricambi del kit nella loro confezione originale

SZ722.HP.180 (confezione da pz. 1) € **9,36** + iva

SZ652R.HP.035 (confezione da pz. 2) € **18,72** + iva

SZ732.HP.050 (confezione da pz. 2) € **18,72** + iva

SZ660.HP.040 (confezione da pz. 2) € **18,72** + iva

SZ638.HP.025 (confezione da pz. 2) € **18,72** + iva